Besoins nutritionnels

Le Bouillon Nutritif (BN) est un milieu ordinaire non sélectif convenant au développement de la plupart des bactéries peu exigeantes : milieu trouble

Les germes exigeants en facteurs de croissance ne se développent pas sur ce milieu: milieu limpide






Aspect des cultures sur bouillon


- Milieu plus ou moins trouble :
- ou homogène floconneux grumeleux

 - avec ondes moirées après agitation
 - Anneau ou voile (pellicule) en surface
 - Dépôt plus ou moins important :
 - muqueuxbactérien
 - Production éventuelle de pigment



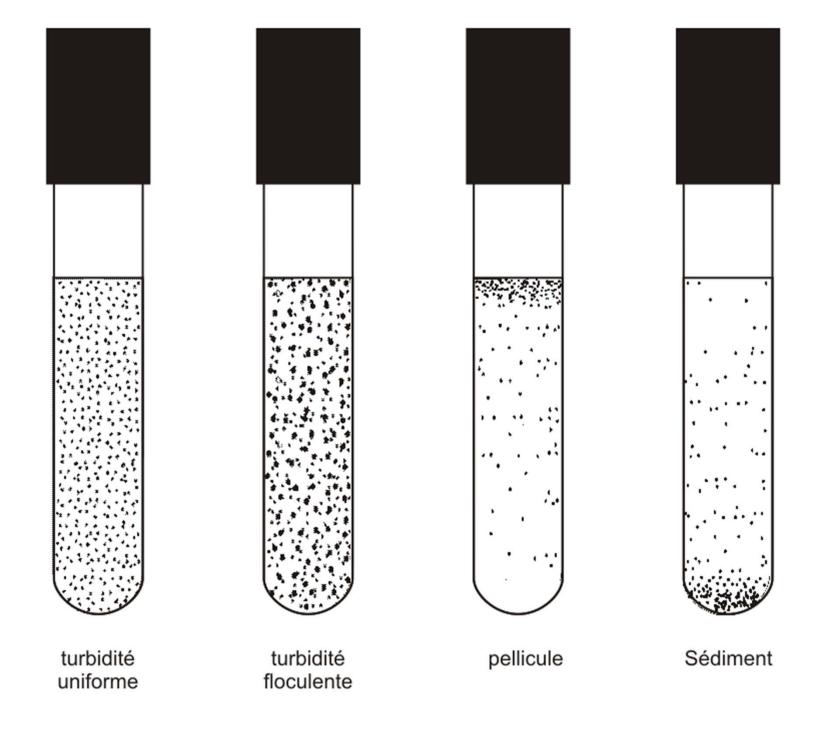

3 types de colonies

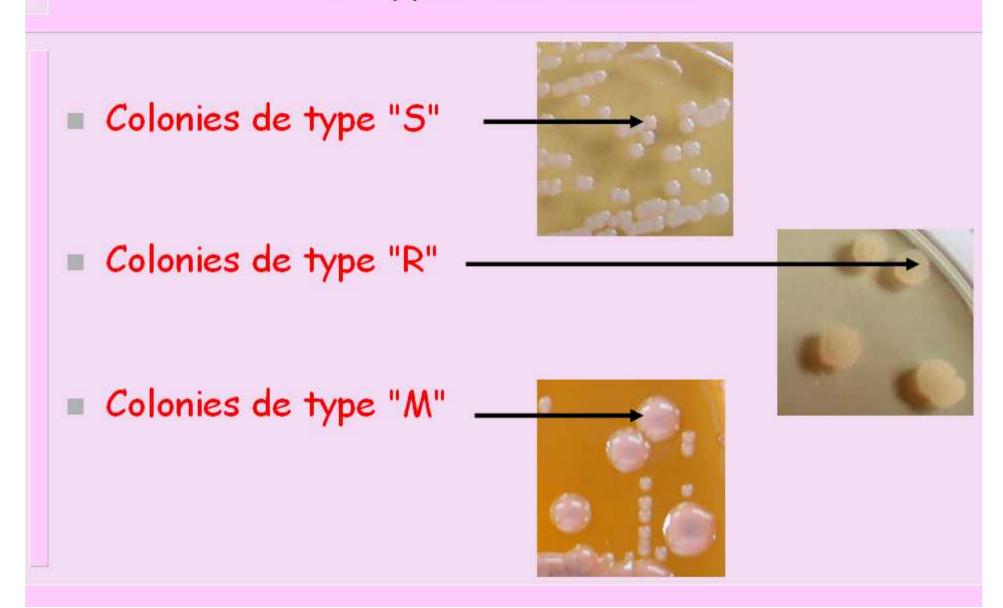

Colonies S

S = Smooth (lisse)

- colonies petites à moyennes à bord net
- lisses, brillantes, humides, bombées

En vieillissant peuvent devenir R

Exemple: Staphylococcus epidermidis





Colonies R

- R = Rough (rugueux)
 - colonies rugueuses, plates,
 - sèches ternes, à bords irréguliers

bactéries ayant perdu leur

Antigène de surface

colonies S en vieillissant peuvent

évoluer en colonies R

Exemple: <u>Bacillus subtilis</u>



Colonies M

M = Mucous (muqueuse)

- grosses colonies muqueuses, bombées,opaques, coulantes



bactéries ayant une capsule

Exemple: Klebsiella pneumoniae



Description détaillée

Taille:

- petite, moyenne, grosse

Couleur:

- blanche, beige ou pigmentée
- Forme vue de dessus:
 - ronde ou bords irréguliers
- Forme vue de profil:
 - Plate ou surélevée, convexe, apiculée
- Aspect de surface:
 - luisante ou terne, lisse ou avec relief
- Passage de la lumière:
 - Transparente, translucide, ou opaque

Particularités éventuelles

Colonies envahissantes : culture en nappe

- ex: Proteus, Bacillus cereus





Production de pigment

- endogène : 1-Micrococcus luteus, 2-Serratia marcescens
- diffusible : 3-Pseudomonas aeruginosa, 4-Ps.fluorescens

2



3



4



Forme Punctiforme Elévation
















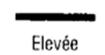







Bord



Régulier



Ondulé



Lobé



Dentelé



Filamenteux



Bouclé